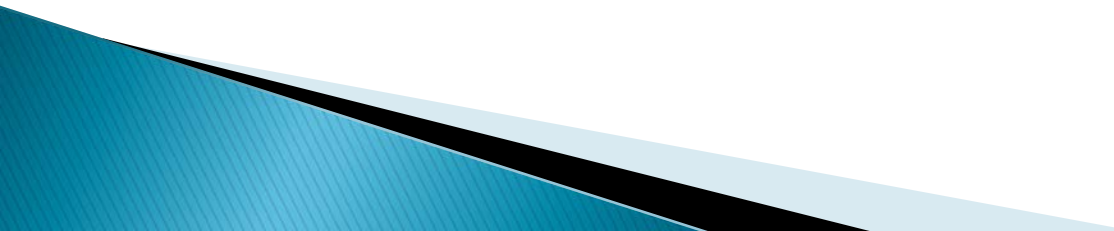


NEBÜLİZATÖR KULLANIMI

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi

Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Eğitim Koordinatörlüğü

- Nebülizatör, ses dalgalarıyla veya basınçlı hava ile sıvı haldeki ilaçları buhar haline getirip solunum yoluyla alınmasını sağlayan cihazdır.
 - Nebülizatör, solunum sıkıntısının çok fazla olduğu durumlarda ilaçları hava yollarına daha iyi iletebilmek amacıyla kullanılmaktadır.
- 

Nebülizatörünüzü ağızlık veya maskeyle kullanabilirsiniz.
Acil durumlarda maskeyi tercih ediniz.








Nebülizatorlar

Nebülizör İle İlaç Uygulama

- Nebülizatör kullanırken hasta oturur pozisyonda olmalıdır .

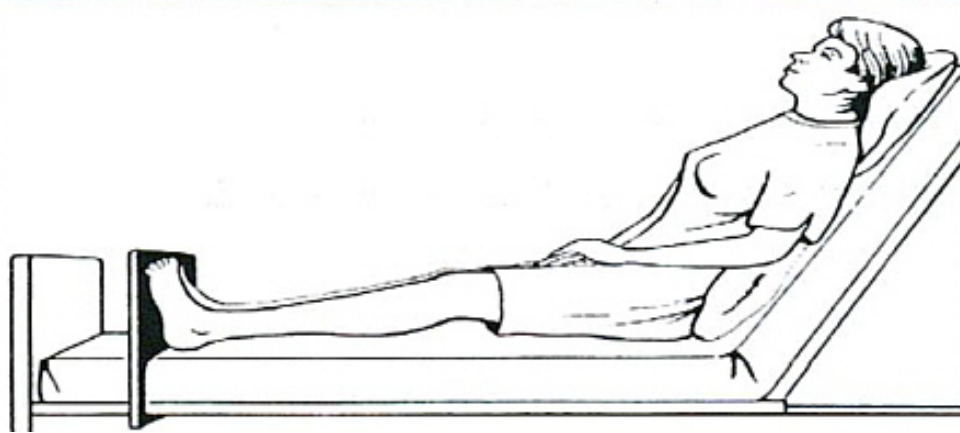

Nebülizör İle İlaç Uygulama

- Ellerinizi iyice yıkayın ve kurulayın.
- Hortumun bir ucunu nebülizatöre bir ucunu haznenin altına yerleştiriniz.



Nebülizör İle İlaç Uygulama

- İlacı paketinden çıkartınız. Hazne içine boşaltınız. 2-3 cc ilave serum fizyolojik koymanız ilaçtan yararlanmayı arttırmaktadır.



Nebülün
boşaltılması



Haznenin
kapatılması



Nebülizatör bağlantıları



Nebülizör İle İlaç Uygulama

- Makinanın fişini takınız ve düğmesini basınız.
- Hasta, hızlı soluk alıp vermemeli, normal hızda solunum yapmalıdır.
- Nebülizasyon 10-15 dakika kadar sürer.20 dakikadan fazla sürüyorsa teknik servisi arayınız.

Nebülizör İle İlaç Uygulama

- Cihazda sıvı değerine yaklařıldığında cızırtı sesi gelir.
- Bu ses duyulduktan sonra 1-2 dakika daha nebülizasyona devam edip ilaç verme işlemini sonlandırınız.



İşlem Sonrası

- İşlem tamamlanınca birkaç derin nefes alıp öksürünüz.
- Mutlaka su ile gargara yapınız. Gargara yapılan suyu yutmayınız.
- Yüzünüzü yıkayınız.

İşlem Sonrası

Nebülizasyon bittikten sonra cihazda kalan sıvı boşaltılmalıdır .Yoksa ilaç kristarilize olur ve kanalları tıkayarak cihazın verimini düşürür.



İşlem Sonrası

- Kullanımdan sonra ilaç haznesi ve bağlantı hortumunu birbirinden ayırın, parçaları ılık su - sabunla yıkayın ve iyice durulayın.
- Parçaları kuruladıktan sonra birleştirerek diğer kullanıma kadar kutusunda koruyun



- Maske nebülizatör kullanma sıklığına bağlı olarak 15 günle ayda bir değiştirilebilir.
- Nebülizatörü kuru ve ışık almayan bir ortamda saklayın.
- Nebülizatörü tüylü alanların üzerinde (halı, battaniye) bırakmayınız.